

Quick Start Guide


1 Sạc pin đầu dò

Sử dụng cáp sạc đi kèm.
Có thể kiểm tra tình trạng sạc trên đèn hiển thị của đầu dò.



Tải ứng dụng SonoMe Pro 2

Tìm “SonoMe Pro” trên App Store (Thiết bị Apple) hoặc Google Play (Thiết bị Android).

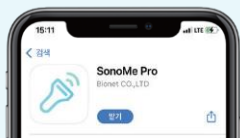

3 Bật đầu dò lên

Ấn nút nguồn.
Khi đầu dò được bật, bạn sẽ thấy biểu tượng pin và biểu tượng mạng đang nhấp nháy.



Network icon

Kết nối đầu dò với thiết bị thông minh 4

Vào phần kết nối Wifi của thiết bị thông minh. Tìm và chọn SSID của đầu dò (e.g. Bx-xxxxxx001). Mật khẩu là Product ID in ở mặt sau của đầu dò. Sau khi đã kết nối được với đầu dò, mở ứng dụng SonoMe Pro. Khi được kết nối, biểu tượng mạng sẽ sáng liên tục mà không nhấp nháy nữa.





<After Freeze>

* Nút điều khiển

Abdomen

Cài đặt trước theo ứng dụng



Chế độ hình ảnh (B, M, Color, PDI, PW)*



Thước đo

Aa

Chú thích



Cine Play



Lưu hình ảnh tới MeView



Lưu video tới MeView

Me

MeView :
Chương trình quản lý hình ảnh



DICOM



Đường trung tâm



Chế độ đôi



Tạm dừng



Thông tin bệnh nhân



Cài đặt



Độ sáng hiển thị



Toàn màn hình



Sinh thiết

* 5CB, 10LB chỉ có chế độ B và M

Bản cứng của hướng dẫn sử dụng sẽ không được kèm theo máy.

Để xem hướng dẫn sử dụng và các thông tin thêm, vui lòng truy cập vào website

www.sonome.com.

